

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA

P902T - PODUSZKA POD PIĘTY

Poduszka odciążająca pięty wykonana z piany wiskoelastycznej (efekt pamięci).

MATERIAŁY

80
kg/m³



Piana Wiskoelastyczna (efekt pamięci)



Zdejmowany pokrowiec Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

KONSERWACJA MATERACA:



KONSERWACJA POKROWCA:



PRZEZNACZENIE

- Dla pacjentów narażonych na powstawanie odleżyn na kończynach dolnych.
- Dla pacjentów z instniejącymi odleżynami na kończynach dolnych.

P902T
(bez pokrowca)




POKROWIEC
Z BI-ELASTYCZNEGO MATERIAŁU

- redukuje tarcie,
- odporny na przetarcia,
- miękki i miły w dotyku,
- odprowadza wilgoć,
- nieprzemakalny,
- można prać w temp. 90 stopni i dezynfekować środkami w sprayu,
- niepalny,
- antypoślizgowy spód,
- wielokrotnego użytku.



P902T
(z pokrowcem)

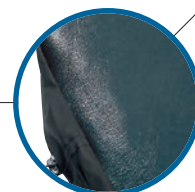



ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD

- utrzymuje poduszkę w miejscu.



P904T
PÓŁ PODUSZKA POD PIĘTY:

- umożliwia ułożenie każdej kończyny oddzielnie.

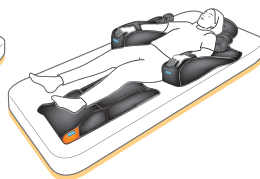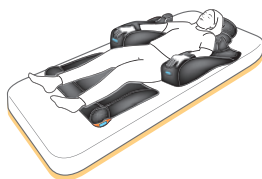

KOD ARTYKUŁU	OPIS	ROZMIAR w cm (DŁUG. x SZER. x WYS.)
P902T1HW	P902T - Poduszka pod piętę	73 x 64 x 10,5
P904T1HW	P904T - Pół poduszka pod piętę	73 x 32 x 10,5

GWARANCJA

2
LATA

mediQual

Mediqual Sp. z o.o.

tel. +48 42 209 49 04
fax. +48 42 209 34 46

e-mail: bok@mediqual.pl
www.mediqual.pl

P902T - PODUSZKA POD PIĘTY

ZALETY PRODUKTU »

Zrobiony z piany wysokoelastycznej z efektem pamięci:

- pięta łagodnie tonie w delikatnej i sprężystej piance,
- zagłębienia i kształt zapewniają lepszy komfort.



Zróżnicowana powierzchnia:


- pozwala na dystrybucję nacisku z miejsc wysokiego ryzyka do miejsc o mniejszym ryzyku.

BIAŁA CZĘŚĆ:

- materiał o mniejszej gęstości, chroni obszary wysokiego ryzyka.

NIEBIESKA CZĘŚĆ:

- materiał o większej gęstości, chroni obszary o niższym ryzyku.

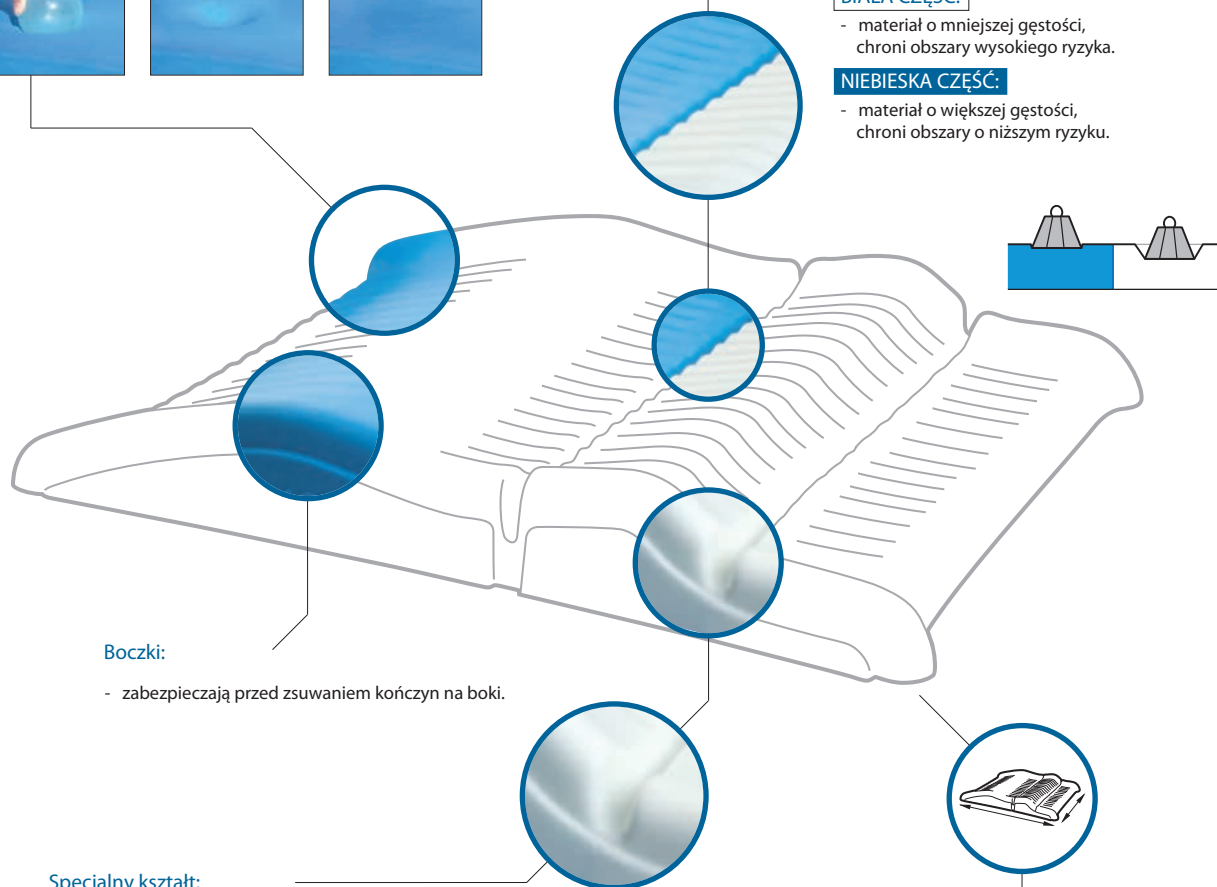

Boczki:

- zabezpieczają przed zsuwaniem kończyn na boki.

Specjalny kształt:

- umożliwia całkowite odciążenie pięty (zdjęcie poniżej)..


Długość poduszki:

- podpira staw kolanowy zabezpieczając go przed przeprostami.

Szerokość poduszki:

- daje swobodę ułożenia kończyn dolnych.

CZĘŚCIOWE ODCIĄŻENIE

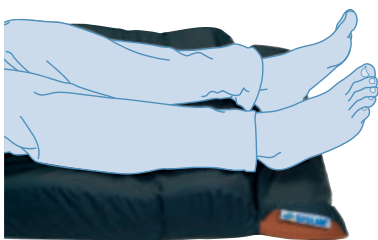

CAŁKOWITE ODCIĄŻENIE

