

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

MATERIAŁY



Mikro-granulki polistyrenu o małej granulometrii



Zdejmowany pokrowiec Polymaille®

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PODUSZKI P9700B - UNIWERSALNA «MAŁA» I P9701B - UNIWERSALNA «STANDARDOWA»

- Jest to idealny produkt pozycjonujący: pomaga podeprzeć pacjenta, łagodzi nacisk na potylicę, stanowi ochronę dla wewnętrznych bocznych obszarów kolan, kostek, a ponadto może być wykorzystany jako poduszka.
- Produkt można wykorzystywać sam lub w połączeniu z innymi artykułami.
- Dostępne są dwa rozmiary: Mały i standardowy.




P9703B - PODUSZKA ODWODZĄCA KOLANA

- Przy jednoczesnym korzystaniu z poduszek P9702 i P9703 pozwala ułożyć pacjenta w wygodnej pozycji pół fowlera (plecy i miednica pod kątem 30°), a także w pozycji grzbietowej dzięki pewnemu przytrzymywaniu miednicy i obszarów odwodzonych z wykorzystaniem półokrągłej poduszki odwodzącej P9703.
- Zmniejsza nacisk na wewnętrzną część kostki oraz na wewnętrzną częśći kolan.



P9702B - PODUSZKA WAŁEK

- Produkt może być wykorzystywany na różne sposoby, np. podkładany pod kolana, by podtrzymać dolne kończyny w pozycji pół fowlera.
- W przypadku łącznego stosowania z poduszką odwodzącą (P9703), umożliwi pewne przytrzymanie odwodzonych kończyn na miejscu, a także chroni wewnętrzne części kolan.

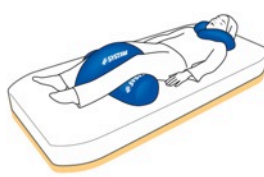

Kod artykułu	Opis	Rozmiary w cm (dł. x szer.)	Rozmiary w calach (dł. x szer.)
P9700B1HW	P9700B - Poduszka uniwersalna «mała»	35 x 26	13,6 x 10
P9701B1HW	P9701B - Poduszka uniwersalna «standardowa»	56 x 40	22 x 15
P9702B1HW	P9702B - Poduszka wałek	Ø 20 x 60	Ø 7 x 23
P9703B1HW	P9703B - Poduszka odwodząca kolana	62 x 32	24 x 12,4
P9704B1HW	P9704B - Poduszka pierścieniowa pod kark	50 x 50	19 x 19
P9705B1HW	P9705B - Poduszka „półksiężyc”	135 x 85	52,5 x 33
P9706B1HW	P9706B - Opcjonalna poduszka pod plecy, używana wraz z poduszką półksiężycową	58 x 40	22,5 x 15
P9707B1HW	P9707B - Poduszka wąż – boczna pozycja	180 x 54	70,8 x 21,6
P9708B1HW	P9708B - Poduszka półksiężycowa wraz z poduszką pod plecy	135 x 85 40 x 58	51,3 x 32,3 15,2 x 22
PKDEMOSAC01	Torba do przenoszenia		
PKDEMOPOSB01	Kompletny zestaw wraz z torbą do przenoszenia		

GWARANCJA 2 LATA

mediQual

Mediqual Sp. z o.o.


tel. +48 42 209 49 04
fax. +48 42 209 34 46

e-mail: bok@mediqual.pl
www.mediqual.pl

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

P9704B - PODUSZKA POD KARK


- ↳ Stanowi wygodne podparcie dla głowy zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej.
- ↳ Łatwa w użyciu, samomocujący pasek.

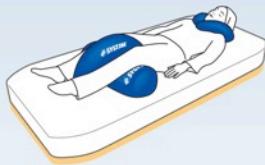

P9705B - PODUSZKA „PÓŁKSIĘZYC”

P9706B - OPCJONALNA PODUSZKA POD GŁOWĘ, UŻYWANA WRAZ Z PODUSZKĄ „PÓŁKSIĘZYC”

- ↳ Pewnie podtrzymuje miednicę oraz górną część ciała w miejscu, gdy pacjent spoczywa w pozycji pół fowlera lub grzbietowej. Łagodzi nacisk na łokcie. Wyposażona w pasek zapewniający dodatkowe podtrzymanie P9706, pozwalający utrzymać głowę w jednym położeniu.
- ↳ Możliwość zastosowania na wózku inwalidzkim.
- ↳ Wyłącznie w SYST'AM®: wyposażona w system EasyShape®, który pozwala na zachowanie pozycji dostosowanej do morfologii pacjenta.

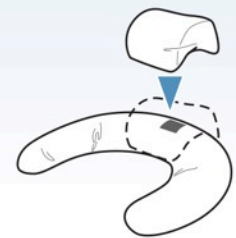

P9707B – PODUSZKA „WAŻ” DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA

- ↳ Zaprojektowana wraz z wewnętrzną poduszką zapewniającą optymalny komfort.
- ↳ Zapewnia wygodne ułożenie kolan, miednicy oraz górnej części ciała podczas leżenia na boku.
- ↳ Wyłącznie w SYST'AM®: wyposażona w system EasyShape®, który pozwala na zachowanie pozycji dostosowanej do morfologii pacjenta.
- ↳ Dostępna w jednym rozmiarze, odpowiednia dla pacjentów o różnych wymiarach.



PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA


PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

«ZALETY» PRODUKTU

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA SYSTEM® Z MIKRO-GRANULKAMI



MIKRO-GRANULKI POLISTYRENU

- Materiał o niezwyklej lekkości: mikro-granulki polistyrenu ekspandowanego o małej granulometrii zapewniają dodatkowy komfort oraz dostosowywanie się podparcia do morfologii pacjenta.
- Produkt niepalny.

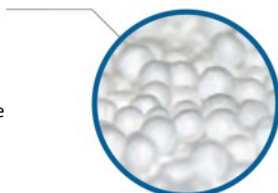

ZAPIĘCIE NA RZEPY

- Proste i efektywne.

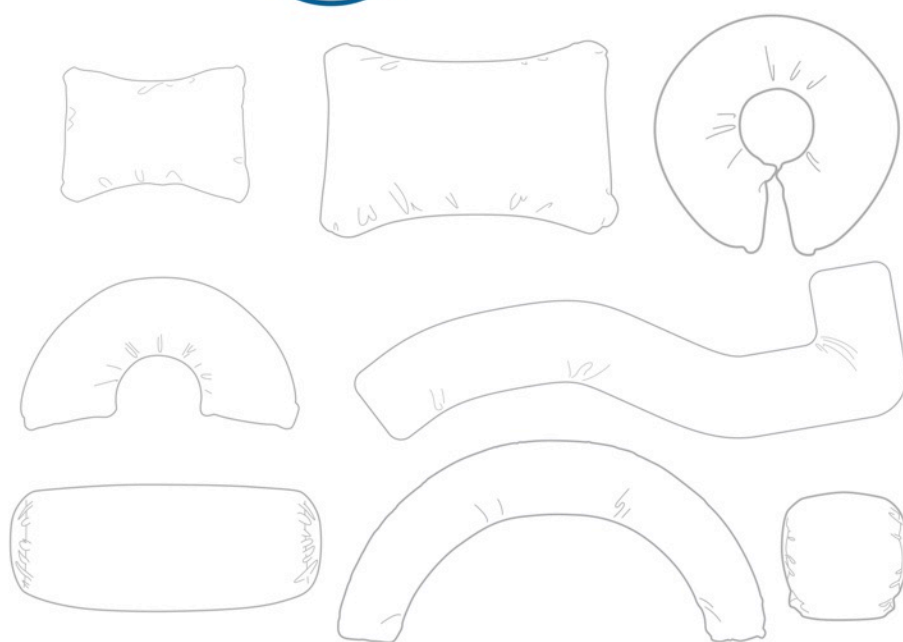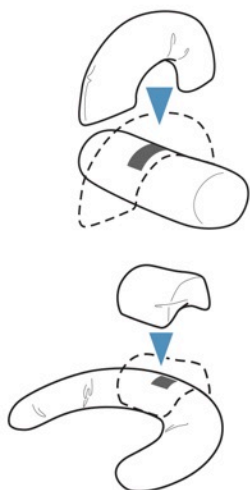

PRODUKTY DOSTARCZANE WRAZ Z DWOMA POKROWCAMI, Z KTÓRYCH JEDEN JEST ZDEJMOWANY

- Łatwość prania
- Lepsza higiena
- Dłuższy okres przydatności poduszki
- Do użycia przez wielu pacjentów.



TORBA DO PRZENOSZENIA

- wraz z miejscem na dokumenty o formacie A4.



OKRYCIE POLYMAILLE®: ODDYCHAJĄCE I WODOODPORNE



- Okrycie antyalergiczne Polyurethane® na materiale poliestrowym nasączonym środkiem przeciwbakteryjnym, przeciwzarazkowym i grzybobójczym.
- POLYMAILLE® rozciąga się w dwóch kierunkach, dzięki czemu pozwala ograniczyć wpływ nacisku i tarcia.
- POLYMAILLE® zapewnia wysoką oddychalność i w znacznym stopniu redukuje macerację.
- POLYMAILLE® jest również całkowicie wodoodporny, dzięki czemu możliwa jest lepsza kontrola higieny.
- Można prać w temp. 95° i dezynfekować środkami w sprayu.
- Produkt niepalny.

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

«ZALETY» PRODUKTU

Charakterystyka poduszek ułożeniowych



EASYSHAPE®
S Y S T E M

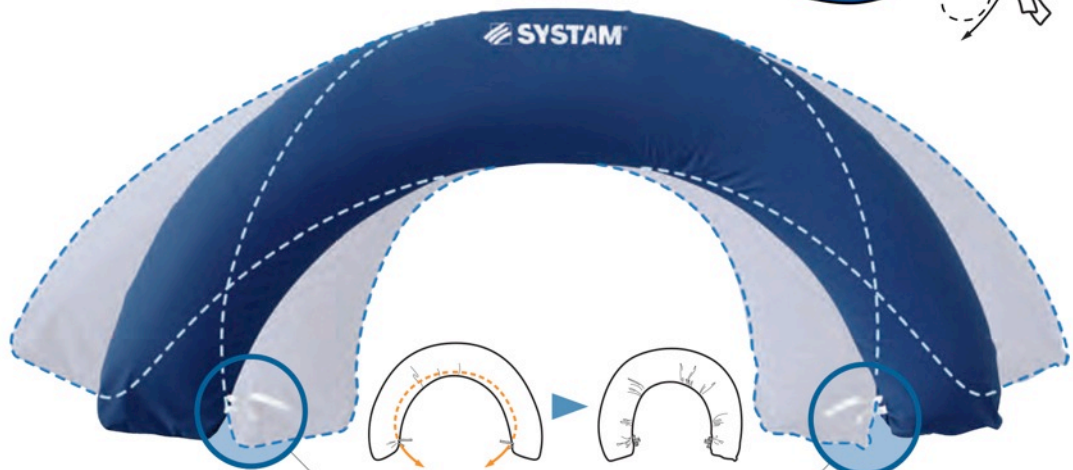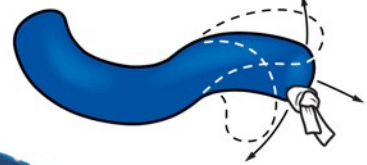

EASYSHAPE® :

SYSTEM DOSTOSOWUJĄCY, DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SYST'AM®

- ↳ Paski przymocowane do okrycia poduszki półksiężycowej (P9705) oraz do okrycia poduszki do bocznego pozycjonowania pacjenta (P9707) zapewniają łatwy sposób dopasowania i utrzymania produktu w położeniu dostosowanym do morfologii pacjenta, podnosząc tym samym komfort pacjenta oraz zwiększając ergonomię podparcia.
- ↳ Pociągnięcie za paski sprawia, że zakrzywienie produktu zwiększa się, uzyskany kształt można następnie zachować poprzez związanie pasków.

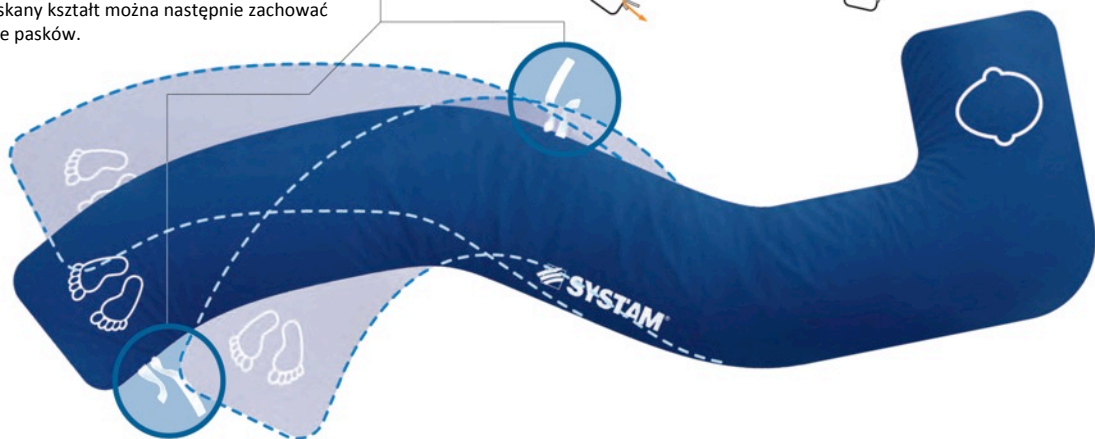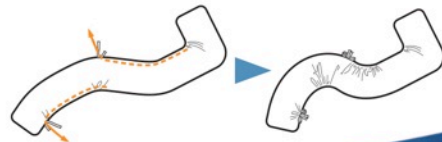

- ↳ Prosty i łatwy w użyciu system EasyShape® pozwala na lepsze dostosowanie produktu do morfologii pacjenta, a także zapewnia zachowanie uzyskanej pozycji przez dłuższy czas.

